

BROCAS E FRESAS CIRÚRGICAS

BROCAS E FRESAS CIRÚRGICAS



BROCAS E FRESAS CIRÚRGICAS

BROCAS E FRESAS CIRÚRGICAS

Indicações de uso e finalidades



Broca Cortante tipo Esférica

Modelo indicado para desbaste agressivo de ossos e cartilagens, com a finalidade de remover tumores osteocartilaginosos, compressões em estruturas nervosas e vasculares ou preparar o local para a instalação fixadores ósseos e implantes.



Broca Diamantada tipo Esférica

Modelo indicado para abrasão e remoção de espículas ósseas, com a finalidade de promover acabamento ósseo. Indicada, nas descompressões de estruturas nervosas e vasculares justapostas ao osso por não agredirem diretamente os tecidos moles.



Broca Cortante tipo Cabeça de Fósforo (Match Head)

Modelo indicado para remoções precisas de tecidos osteocartilaginosos em procedimentos minimamente Invasivos da coluna, foraminotomias, craniotomias do tipo Keyhole, procedimentos Maxilocraniofaciais e da base do Crânio.



Broca para Perfuração óssea com Stop

Modelo indicado para realização de perfurações ósseas onde haja a necessidade de controle de profundidade durante a inserção da broca.



Broca de Haste Flexível tipo Esférica Cortante

Modelo indicado para desgaste ósseo espículas de ossos no acesso das estruturas da base do crânio como nas ressecções tumorais da base do crânio e em procedimentos da Hipófise.




Broca de Haste Flexível tipo Esférica Diamantada

Modelo indicado para abrasão moderada e remoção de espículas ósseas, ideal para desgaste ósseo de estruturas como assoalho orbitário, Sela Túrcica, Clivus e nas proximidades dos pilares carotídeos nas cirurgias da Hipófise e acessos neurais por via Transesfenoidal.


BROCAS E FRESAS CIRÚRGICAS

Indicações de uso e finalidades

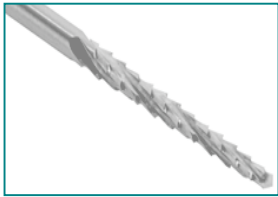

Broca de Corte Lateral tipo Lindemann

Modelo indicado para realizar osteotomias e corte cartilagens áreas anatômicas de acesso mais restrito.

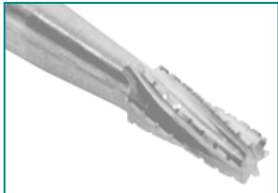

Broca de Corte Lateral tipo Tronco Cônica

Modelo indicado para realizar perfurações, cortes precisos e osteotomias delicadas em ossos, cartilagens, além de ser eficaz nas remoções dentárias.



Broca Cortante tipo (Egg)

Modelo indicado para remoção controlada de ossos e cartilagens, com a finalidade de realizar descompressões em estruturas nervosas ou vasculares ou preparar o local para a instalação fixadores ósseos e implantes.



Broca Cortante tipo Bud

Modelo indicado para remoção controlada e progressiva de ossos e cartilagens, ampliação de óstios sinusais, mastoidectomias ou osteoplastias pré-implantações.



Broca Cortante tipo Cilíndrica

Modelo indicado para remoção agressiva de tecido osteocartilaginosos em ressecções osteotumorais, grandes osteotomias e preparo de implantes.




Broca Cortante tipo Pêra

Modelo indicado para remoção de tecido osteocartilaginosos com mínima vibração e geração de espículas ósseas. Pode ser utilizada em osteoplastias e preparação de implantes.



Fresa para Craniótomo

Modelo indicado para utilização em conjunto com um craniótomo elétrico ou pneumático para realização de craniotomias e laminectomias.

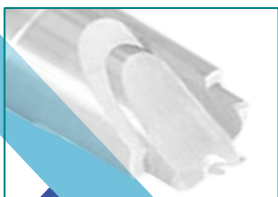

Broca de Parada Automática

Indicada para realizar o primeiro acesso em procedimentos de craniotomia através de orifícios de trepanação, tendo sua ação interrompida automaticamente ao entrar em contato com tecidos moles.

BROCAS E FRESAS CIRÚRGICAS


Dimensões e Tipos de Travamento




BROCA TIPO ESFÉRICA CORTANTE				
Ø 0,8mm	Ø 1,0mm	Ø 1,4mm	Ø 2,3mm	Ø 3,1mm
Ø 4,0mm	Ø 4,5mm	Ø 5,0mm	Ø 6,0mm	Ø 7,0mm



INOX
ANVISA: 80482490025

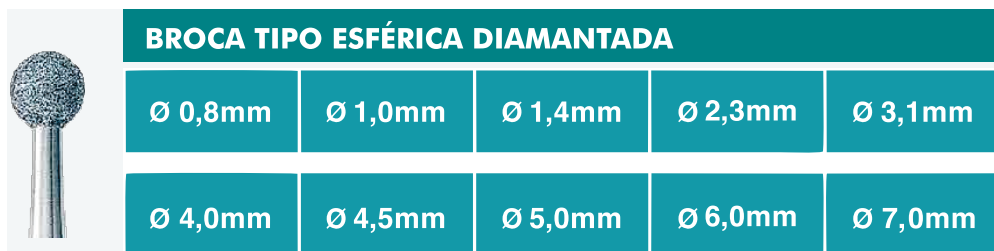


BROCA TIPO ESFÉRICA DIAMANTADA				
Ø 0,8mm	Ø 1,0mm	Ø 1,4mm	Ø 2,3mm	Ø 3,1mm
Ø 4,0mm	Ø 4,5mm	Ø 5,0mm	Ø 6,0mm	Ø 7,0mm

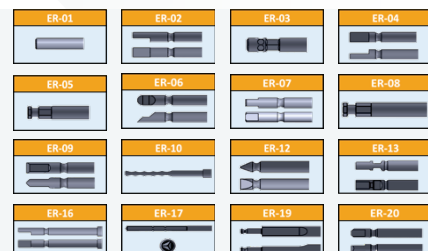

INOX
ANVISA: 80482490024




BROCA CORTANTE TIPO CABEÇA DE FÓSFORO (Head Match)				
Ø 1,8mm	Ø 3,1mm	-	-	-

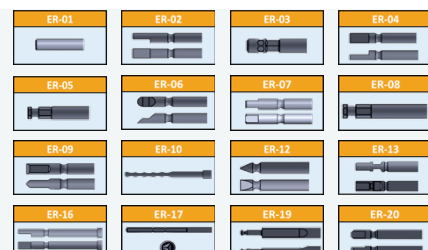


INOX
ANVISA: 80482490025




BROCA DE PERFURAÇÃO COM STOP				
Ø 1,0mm	Ø 1,1mm	Ø 1,2mm	Ø 1,3mm	Ø 1,5mm
Ø 1,6mm	Ø 1,8mm	Ø 2,0mm	Ø 2,1mm	-

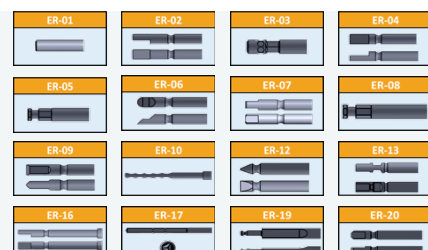


INOX
ANVISA: 80482490003

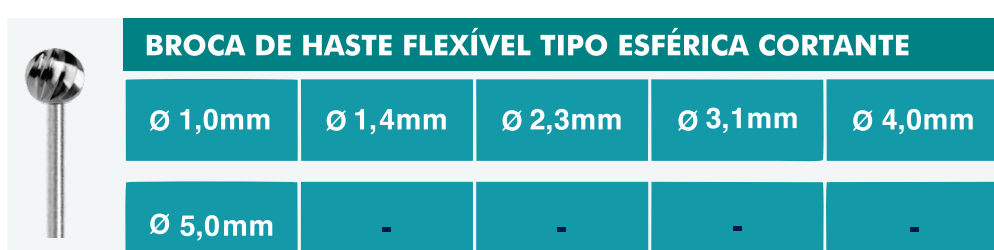


BROCA DE HASTE FLEXÍVEL TIPO ESFÉRICA CORTANTE				
Ø 1,0mm	Ø 1,4mm	Ø 2,3mm	Ø 3,1mm	Ø 4,0mm
Ø 5,0mm	-	-	-	-

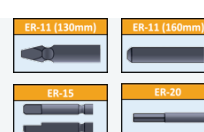

INOX
ANVISA: 80482490025

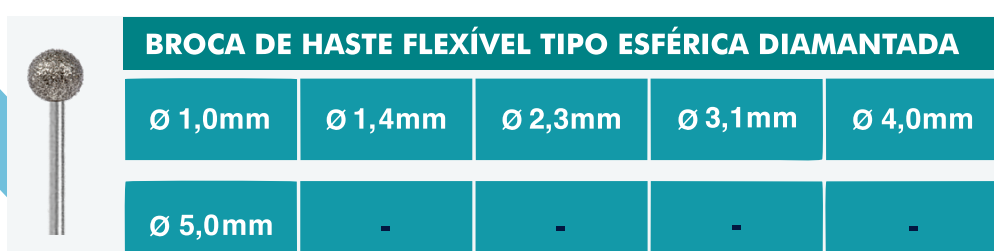

BROCA DE HASTE FLEXÍVEL TIPO ESFÉRICA DIAMANTADA				
Ø 1,0mm	Ø 1,4mm	Ø 2,3mm	Ø 3,1mm	Ø 4,0mm
Ø 5,0mm	-	-	-	-

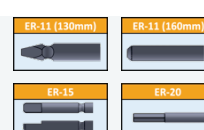

INOX
ANVISA: 80482490024



STERILE EO



3 ANOS



USO ÚNICO

BROCAS E FRESAS CIRÚRGICAS

Dimensões e Tipos de Travamento



FRESA DE CORTE LATERAL TIPO LINDEMANN

	Ø 1,6mm	Ø 1,9mm	-	-
	9,0mm	15,2mm	-	-



INOX
ANVISA: 80482490025

CARBIDE
ANVISA: 80482490028



BROCA DE CORTE LATERAL TIPO TRONCO CÔNICA

	699 Ø 1,0mm	701 Ø 1,2mm	702 Ø 1,6mm	703 Ø 2,1mm
	4,6mm	5,1mm	5,1mm	5,1mm



CARBIDE
ANVISA: 80482490028



BROCA CORTANTE TIPO OVAL (Egg)

Ø 4,0mm	Ø 5,0mm	-	-	-
---------	---------	---	---	---



INOX
ANVISA: 80482490025



BROCA CORTANTE TIPO BUD

Ø 4,0mm	Ø 5,0mm	-	-	-
---------	---------	---	---	---



INOX
ANVISA: 80482490025



BROCA CORTANTE TIPO CILINDRO

Ø 4,0mm	Ø 5,0mm	-	-	-
---------	---------	---	---	---



INOX
ANVISA: 80482490025



BROCA CORTANTE TIPO PÊRA

Ø 4,0mm	Ø 5,0mm	-	-	-
---------	---------	---	---	---



INOX
ANVISA: 80482490025



STERILE EO



BROCAS AUTOMÁTICA E FRESA PARA CRANIÓTOMO

Dimensões e Tipos de Travamento

FRESA PARA CRANIÓTOMO


	Ø 1,6mm	-	-	-
	12,0mm	16,0mm	25,0mm	-



INOX
ANVISA: 80482490025

BROCA DE PARADA AUTOMÁTICA

	Ø 11/8mm	Ø 14/11mm	-	-	-
	Ø 8mm	Ø 11mm	-	-	-
	Ø 2mm	Ø 3mm	-	-	-

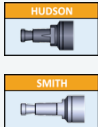

INOX
ANVISA: 80482490025



STERILE EO



3 ANOS



USO ÚNICO